

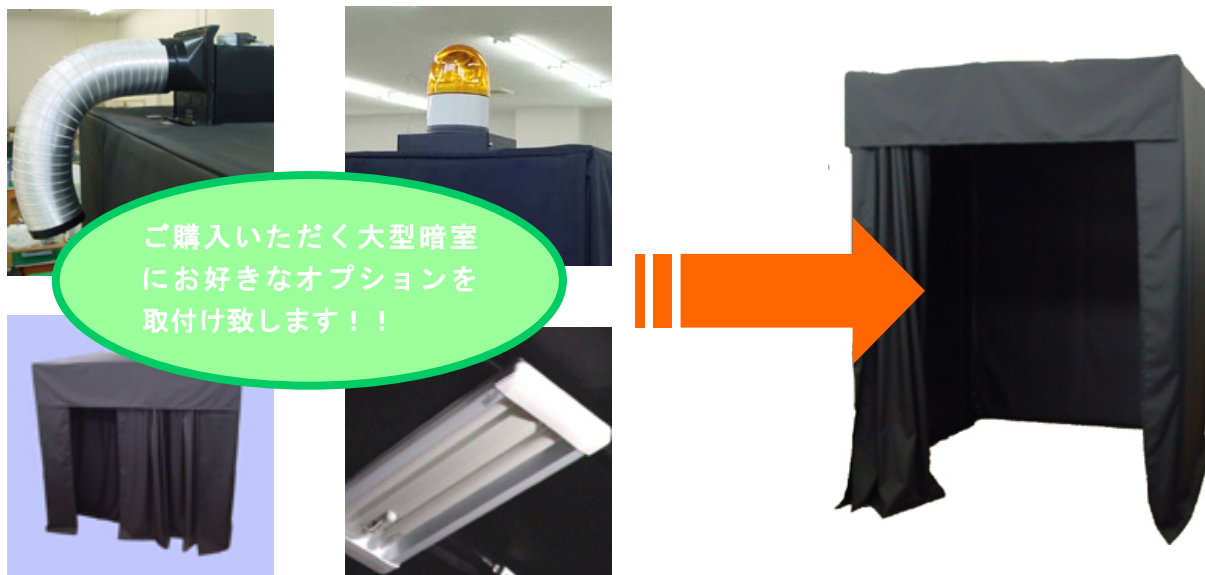
SCIENTEX

大型暗室専用

NEW !!

# オプション取付けサービス

大型暗室に新しくオプション取付けが加わりました。暗室本体にお好みのオプションを取付けることが可能です。**オプション同士の組合せも可能！！**作業環境に合わせたオプションカスタマイズで暗室内作業をより快適にすることができます。



他にも「こんなものを付けて欲しい！！」「こんな風に使いたい！！」などご要望がありましたら、お知らせ下さい！

## オプション一覧

### ①換気扇

室内換気扇を設置。暗室内の換気を行い快適に作業が行えます。

(暗幕への穴あけは予めこちらで行います。)

暗室側面又は天井に取付可能です。

また、暗室本体注文後の取付にも対応致します。

排気風量・・・85m<sup>3</sup> / h

換気扇は静寂タイプ(騒音レベル27db)を使用。

※騒音レベル20dbレベル・・・木の葉が擦れ合う程度の音



### ②照明器具

一時的に室内を明るくして

作業したい場合に便利です。

蛍光灯(40W、20W)、紫

外線カットタイプ光量調整

型(100ルクス～100

0ルクス可変)LEDタイプ

照明色が選択可能。



### ③キャスター

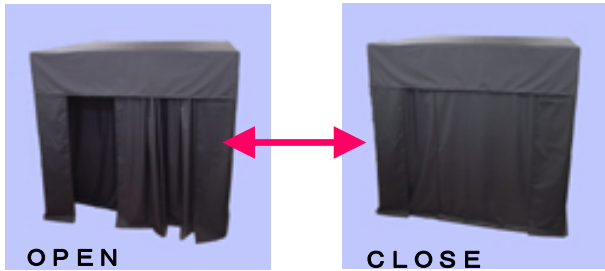



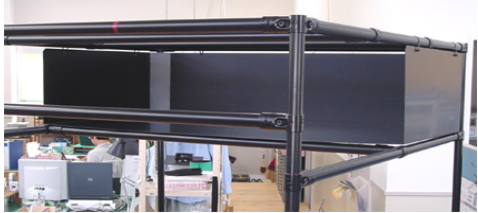
暗室本体を頻繁に移動する

場合スムーズ行えます。パイ

プ支柱にキャスターを取付

けます。



<p><b>④二重カーテン</b></p> <p>通常のカーテン式暗室にもう1枚カーテンを設置。入退室時の光漏れを防止します。</p> 	<p><b>⑤インターロック</b></p> <p>暗室の4隅にインターロックが付属し、回転警告灯と連動。レーザー機器を使用の場合、安全管理が出来ます。</p> <p>スイッチ マジックタイプ用 マグネット式 クリーンルーム用 マグネット式 カーテンタイプ用 近接センサ式</p> 								
<p><b>⑥安全標識灯</b></p> <p>暗室入口に安全警告灯が設置できます。表示内容は変更可能。お客様ご希望の文章を表示することも可能です。色の変更も可能。(色は赤、緑、青の中からお選びいただけますが、他の色でもできる限り製作致します。)</p>  <p>※画像はイメージです。</p> <table border="0" data-bbox="780 680 1415 916"> <tr> <td><b>安全警告灯表示例</b></td> <td>※文字表示は白抜きのみ</td> </tr> <tr> <td><b>レーザー使用中</b></td> <td><b>火気厳禁</b></td> </tr> <tr> <td><b>X線使用中</b></td> <td><b>開放厳禁</b></td> </tr> <tr> <td><b>開閉注意</b></td> <td><b>作業中</b></td> </tr> </table>		<b>安全警告灯表示例</b>	※文字表示は白抜きのみ	<b>レーザー使用中</b>	<b>火気厳禁</b>	<b>X線使用中</b>	<b>開放厳禁</b>	<b>開閉注意</b>	<b>作業中</b>
<b>安全警告灯表示例</b>	※文字表示は白抜きのみ								
<b>レーザー使用中</b>	<b>火気厳禁</b>								
<b>X線使用中</b>	<b>開放厳禁</b>								
<b>開閉注意</b>	<b>作業中</b>								
<p><b>⑦酸素濃度モニター</b></p> <p>酸素濃度モニターを設置。常に暗室内の酸素濃度を確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検知対象ガス・・・大気中の酸素</li> <li>・検知範囲・・・0~25.0vol% (※体積あたりの酸素濃度を%で表したもの)</li> <li>・アラーム記録機能・・・警報濃度・発生日時10件分を記録できます。</li> </ul> <p>仕様の異なるモニターもご用意できますのでお問い合わせ下さい。</p>  <p>※画像はイメージです。</p>									
<p><b>⑧ガス濃度モニター</b></p> <p>有機溶剤、アルコール、ベンゼンなどを暗室内で使用する場合にガスモニターを設置しておけば常に数値を確認でき安全対策にもなります。有機ガスモニター、二酸化炭素モニターなど好みのモニターをお付け致します。</p>	<p><b>⑨棚</b></p> <p>暗室内の上部に棚をお取付け致します。物置スペースが確保でき便利です。</p> 								

## 新しいオプションが登場次第ぞくぞく追加していきます！！

- ・さらに詳しい内容・大型暗室についてはHPで→ <http://www.scientex.co.jp>  
または「大型暗室 オプション」で検索
- ・サイズ・価格のお問い合わせは→ TEL 053-428-8888

※仕様は改良、諸般の事情で予告なく変更される場合があります。

●お問い合わせ 資料請求先

●代理店

株式会社サイエンテックス 営業部

(営業時間 9:00~18:00)

〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1丁目4-10-4

TEL 053-428-8888 / FAX 053-428-8889

URL <http://www.scientex.co.jp>

E-mail [info@scientex.co.jp](mailto:info@scientex.co.jp)